

該 非 判 定 書

作成責任者

相模原市中央区矢部 3-28-6

柚木行政書士事務所

代表・行政書士 柚木 勇

登録 10090102

042-719-4999 / 090-6171-7744



対象貨物・役務

Dionex Corporation 製
カチオン・サプレッサー
型式 CSRS 300 (4mm)

判定（2018.1.22 施行法令準拠）

輸出令別表第一の	1 項～15 項	対象外
同	16 項	該当
外為令別表の	1 項～15 項	対象外
同	16 項	対象外

判定理由

対象貨物は、イオンクロマトグラフにおいて、分析対象水溶液の電気伝導度を下げ、もって分析感度を向上させる装置である。

輸出令について

対象貨物は、カチオン・サプレッサーであるが、これは輸出令別表第一に掲げられた物品ではない。対象貨物はまた、イオンクロマトグラフ装置の部分品と見ることもできるが、イオンクロマトグラフ装置も同表に掲げられた物品ではない。

よって、対象貨物は輸出令別表第一の 1 項から 15 項について対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、技術情報、データ、プログラムの類は付属しない。よって、外為令の 1 項から 15 項についても、対象外と判定する。

添付資料

1. 項目別対比表（全 1 頁）
2. 対象貨物資料（全 2 頁）

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用) 6364

輸出令別表第1で明らかに規制されていない貨物用

貨物名: カチオン・サプレッサー

メーカー名: Dionex Corp.

型及び銘柄: CSRS 300 (4mm)

©CISTEC

2018.01.22施行政省令等対応 (1 / 1)

輸出令別表第1 関連	判定欄 (いずれかにレ点)	貨物の内容・理由等
輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当する貨物か?	☐ はい ☒ いいえ	液体(イオン)クロマトグラフの 感度向上

注意事項:

※判定欄で「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、該非判定をすること。本シートは、使用できない。

※輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当しない場合であっても、食品や木材等を除き、輸出令別表第3 (ホワイト国) 以外に輸出する場合は、キャッチオール規制 (用途・需要者) について確認すること。

作成責任者: (作成年月日: 1430 年 11 月 15 日)	
会社名	柚木行政書士事務所
所属・役職	行政書士・STC Associate
(フリガナ) 氏名	ユノキ イサム 柚木 勇
電話	042-719-4999

PRODUCT MANUAL

FOR THE

ANION SELF-REGENERATING SUPPRESSOR 300
(ASRS[®] 300 (4-mm), P/N 064554)
(ASRS[®] 300 (2-mm), P/N 064555)

CATION SELF-REGENERATING SUPPRESSOR 300
(CSRS[®] 300 (4-mm), P/N 064556)
(CSRS[®] 300 (2-mm), P/N 064557)

©Dionex Corporation, 2007
Document No. 031956
Revision 05
August 2007

1. INTRODUCTION

1.1. Self-Regenerating Suppressor

The Self-Regenerating Suppressor (SRS® 300) replaces the ULTRA II suppressor product line. The SRS 300 is redesigned with exterior hardware changes that allow the suppressor to be more pressure tolerant than previous generation suppressor devices. The SRS 300 continues to use cleaned ion exchange components (gasketed screens and membranes) as the ULTRA II suppressor devices. The 2mm ASRS 300 replaces the ASRS MS suppressor product and should be used for anion Mass Spectrometry (MS) Applications.

The Self-Regenerating Suppressor 300 (SRS 300) is available in two versions: the Anion Self-Regenerating Suppressor 300 (ASRS® 300) or Cation Self-Regenerating Suppressor 300 (CSRS® 300). The SRS 300 system consists of a Self-Regenerating Suppressor, the SRS Control, the back pressure coils, and the Gas Separator Waste Tube. This high performance, low maintenance AutoSuppression® system provides a reliable solution for Ion Chromatography.

Additionally, the SRS 300 offers high capacity suppression while adding minimal dead volume to the analytical system. The ASRS 300 provides continuous suppression of traditional eluents, and more concentrated eluents up to 200 mM NaOH. The CSRS 300 offers continuous suppression of concentrated eluents up to 100 mN H₂SO₄ or MSA. This high capacity significantly expands the capabilities and simplifies the operation of Ion Chromatography.

The SRS 300 is available in both 2-mm and 4-mm formats for use with 2, 3, 4, or 5-mm Ion Chromatography columns and systems. The 2-mm SRS 300 is specially designed with reduced internal volume to ensure optimum performance with 2-mm columns and systems. In fact, the suppression capacity of the 2-mm version is greater than the 4-mm version due to the reduced eluent flow rate and proportionally greater surface area.

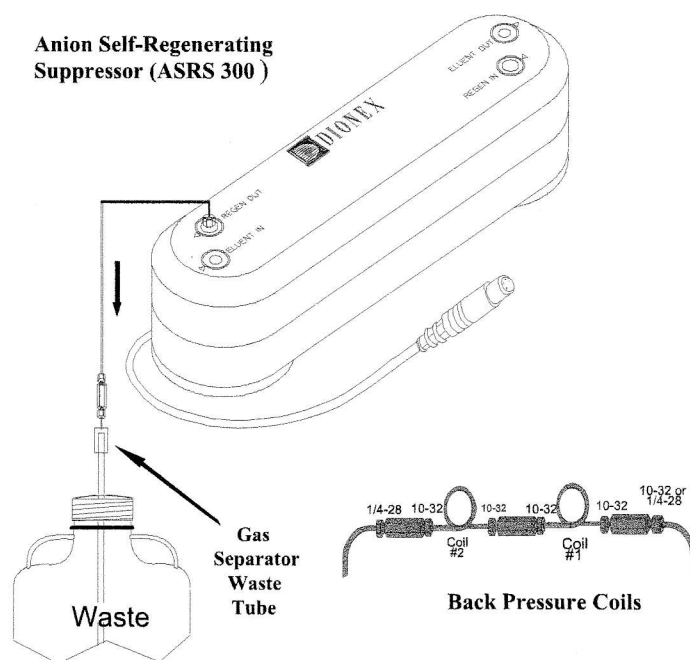


Figure 1
The Self-Regenerating Suppressor

Assistance is available for any problem during the shipment or operation of Dionex products through the Dionex North America Technical Call Center at 1-800-DIONEX-0 (1-800-346-6390) or through any of the Worldwide Dionex Offices on the Reference Library CD-ROM.